


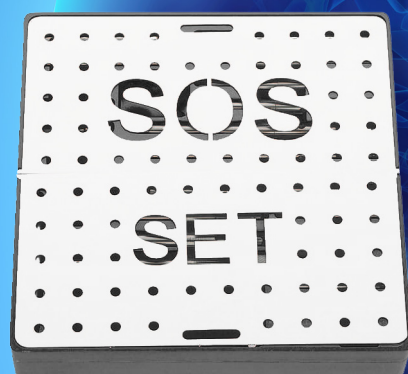

SOS Schraubenentfernung Set

SOS EASY SCREW REMOVAL MODULE

SOS-Easy Schraubendreher Module

Modulares, multifunktionelles Implantat-Entfernungssystem für die Orthopädie, Traumatologie.

Notfallinstrumente Set zur Entfernung beschädigter und gebrochener Knochenschrauben

Materialentfernung für alle gängigen Schraubenköpfe mit auswechselbaren Einsätzen. SOS Set zur Entfernung defekter oder abgebrochener Schrauben.

Schraubendrehereinsätze mit AO-Schaft

Notfallinstrumente Set zur Entfernung beschädigter und gebrochener Knochenschrauben (Schrauben mit einem Durchmesser von 1,5 mm bis 7,0 mm)

SOS-Easy Screw Removal Module


Modular, multifunctional implant removal system for orthopedics, traumatology.

Emergency instrument set for removal of damaged and broken bone screws.

Material removal for all common screw heads with interchangeable inserts. SOS Set for the removal of defective or broken screws.


Screwdriver inserts with AO shaft

Emergency instruments set for the removal of damaged and broken bone screws (screws with a diameter of 1.5 mm to 7.0 mm).

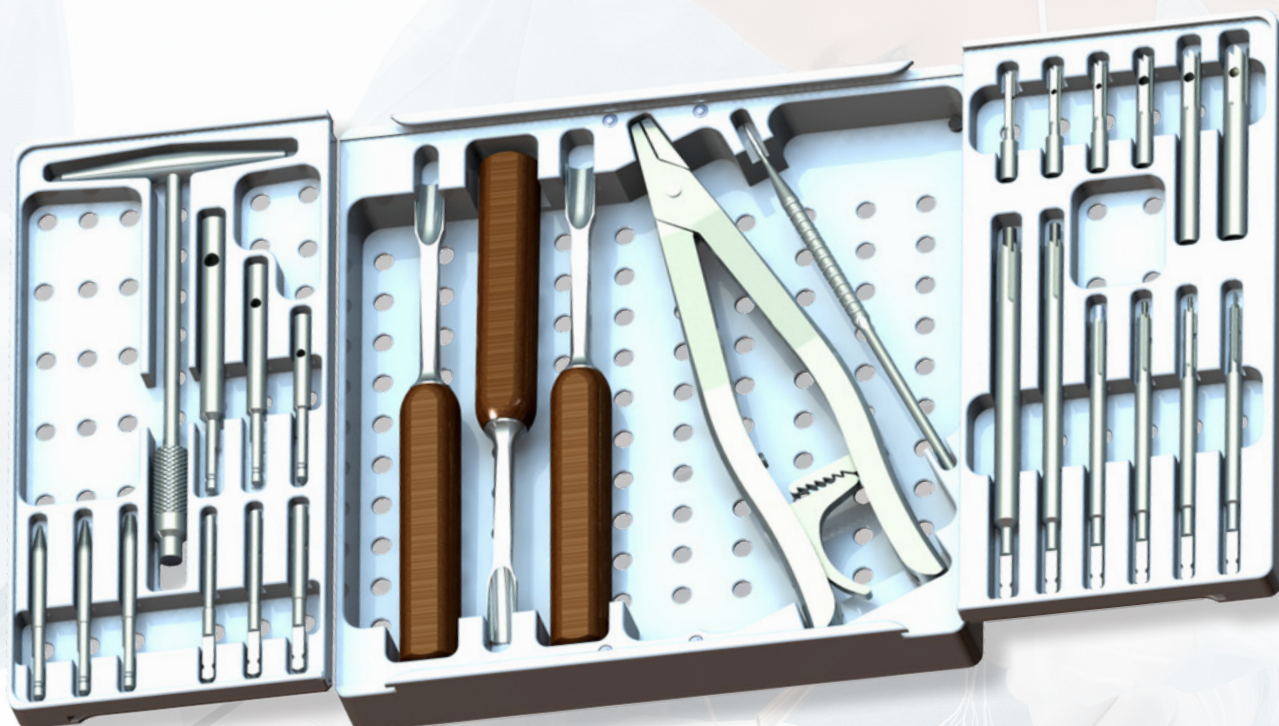

Notfallinstrumente zur Entfernung von beschädigten und gebrochenen Knochen Schrauben (ab einem Durchmesser von 1.5 mm bis zu 7.0 mm Schrauben)

Emergency instruments for the removal of damaged and broken bone screws (from a diameter of 1.5 mm up to 7.0 mm screws)

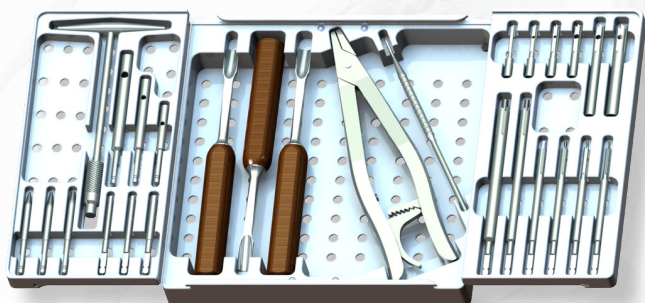

Schrauben Entfernungsset
Screw Extraction Set

Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-2500-000	komplett, 21.0cm x 21.0 cm complete 21.0 cm x 21.0 cm



Schrauben Entfernungsset
Screw Extraction Set

Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-2500-0031	Tray (einzeln) / Tray (empty)




STERIL CONTAINER
STERILIZING CONTAINER

Art.Nr. Ref.No.	Bezeichnung Description	Farbe Color
99-310-100	Sterilcontainer komplett 285 x 280 x 100 mm Sterilizing Container complete 285 x 280 x 100 mm	
99-320-100	Sterilcontainer komplett 285 x 280 x 150 mm Sterilizing Container complete 285 x 280 x 150 mm	
99-330-100	Sterilcontainer komplett 285 x 280 x 100 mm Sterilizing Container complete 285 x 280 x 100 mm	
99-340-100	Sterilcontainer komplett 285 x 280 x 100 mm Sterilizing Container complete 285 x 280 x 100 mm	
99-350-100	Sterilcontainer komplett 285 x 280 x 100 mm Sterilizing Container complete 285 x 280 x 100 mm	
99-360-100	Sterilcontainer komplett 285 x 280 x 100 mm Sterilizing Container complete 285 x 280 x 100 mm	

die Sterilcontainer sind auch einzeln als Boden und Deckel erhältlich.
 the sterile containers are also available individually as base and lid.



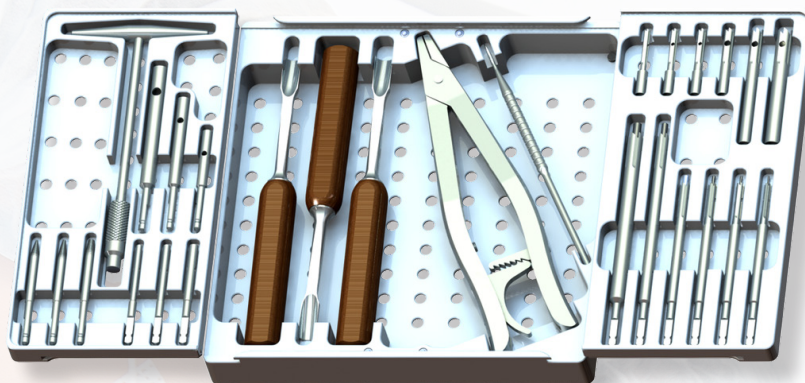

Satz - Auflistung für Satz: 52-2500-000 Schrauben- Extraktion - Satz komplett
Set - Listing for Set: 52-2500-000 Screw- Extraction - Set Complete

Art.Nr. / Ref.No.	Länge / Length	Pack / PCS
52-2500-0031	AL-Tray für Schraubenextraktionsset / AL-Tray for Screw-Extraction Set-52-2500-000	1
52-1516-003	Konische Extraktionsschraube für 1,5 / 2,0-mm-Schrauben Conical Extraction Screw for 1.5 / 2.0 mm Screws	1
52-2716-003	Konische Extraktionsschraube für 2,7 / 3,5 / 4,0-mm-Schrauben Conical Extraction Screw for 2.7 / 3.5 / 4.0 mm Screws	1
52-4516-003	Konische Extraktionsschraube für 4,5 / 5,0 / 6,5 / 7,0-mm-Schrauben Conical Extraction Screw for 4.5 / 5.0 / 6.5 / 7.0 mm Screws	1
52-1516-001	Extraktionsbolzen für 1,5-mm-Schrauben / Extraction Bolt for 1.5 mm Screws	1
52-2016-001	Extraktionsbolzen für 2,0-mm-Schrauben / Extraction Bolt for 2.0 mm Screws	1
52-2716-001	Extraktionsbolzen für 2,7-mm-Schrauben / Extraction Bolt for 2.7 mm Screws	1
52-3516-001	Extraktionsbolzen für 3,5 / 4,0-mm-Schrauben / Extraction Bolt for 3.5 / 4.0 mm Screws	1
52-4516-001	Extraktionsbolzen für 3,5 / 4,0-mm-Schrauben / Extraction Bolt for 4.5 mm Screws	1
52-6516-001	Extraktionsbolzen für 5,0 / 6,5 / 7,0-mm-Schrauben / Extraction Bolt for 5.0 / 6.5 / 7.0 mm Screws	1
52-1516-002	Hohlfräser für 1,5-mm-Schrauben / Hollow Reamer for 1.5 mm Screws	1
52-2016-002	Hohlfräser für 2,0-mm-Schrauben / Hollow Reamer for 2.0 mm Screws	1
52-2716-002	Hohlfräser für 2,7-mm-Schrauben / Hollow Reamer for 2.7 mm Screws	1
52-3516-002	Hohlfräser für 3,5 / 4,0 mm Schrauben / Hollow Reamer for 3.5 / 4.0 mm Screws	1
52-4516-002	Hohlfräser für 4,5-mm-Schrauben / Hollow Reamer for 4.5 mm Screws	1
52-6516-002	Hohlfräser für 5,0 / 6,5 / 7,0 mm Schrauben / Hollow Reamer for 5.0 / 6.5 / 7.0 mm Screws	1
52-1516-0203	Spare Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 1.5 mm (used for 1.5 mm Screws) Spare Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 1.5 mm (used for 1.5 mm Screws)	1
52-2016-0203	Ersatzfräser (Fräserrohr) für Hohlfräser 2,0 mm (für 2,0 mm Schrauben) Spare Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 2.0 mm (used for 2.0 mm Screws)	1
52-2716-0203	Ersatzfräser (Fräserrohr) für Hohlfräser 2,7 mm (für 2,7 mm Schrauben) Spare Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 2.7 mm (used for 2.7 mm Screws)	1
52-3516-0203	Ersatzfräser (Fräserrohr) für Hohlfräser 3,5 / 4,0 mm (für 3,5 / 4,0 mm Schrauben) Spare Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 3.5 / 4.0 mm (used for 3.5 / 4.0 mm Screws)	1
52-4516-0203	Ersatzfräser (Fräserrohr) für Hohlfräser 4,5 mm (für 4,5 mm Schrauben) Spare Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 4.5 mm (used for 4.5 mm Screws)	1
52-6516-0203	Ersatzfräser (Fräserrohr) für Hohlfräser 5,0 / 6,5 / 7,0 mm (für 5,0 / 6,5 / 7,0 mm Schrauben) Spare Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 5.0 / 6.5 / 7.0 mm (used for 5.0 / 6.5 / 7.0 mm Screws)	1
52-4616-1800	Scharfer Haken, Länge 155 mm / Sharp Hook, Length 155 mm	1
52-0300-1600	Mini Lexer Hohlmeißel, 4 mm / Mini Lexer Gouge, 4 mm	1
52-0300-1601	Mini Lexer Hohlmeißel, 6 mm / Mini Lexer Gouge, 6 mm	1
52-0300-1603	Mini Lexer Hohlmeißel, 10 mm / Mini Lexer Gouge, 10 mm	1
52-0121-1603	Schraubenhaltepinzette 20,5 cm / 8" / Screw Holding Forceps 20.5 cm / 8"	1
52-0616-1600	T-Handle, Large with AO-Quickcoupling Lenght 160 mm T-Handle, Large with AO-Quickcoupling Lenght 160 mm	1
52-2500-001	Vorlage zur Verwendung Gebrochene Schrauben-Extraktionsinstrumente (Gebrauchsanweisung) Template for use Broken Screw-Extraction Instruments (Guide Manual for Use)	1

52-2500-001


**Schablone zur Verwendung gebrochener Schrauben
Extraktion Instrumente (Leitfaden für die Verwendung im Operationssaal)**

52-2500-001

**Template for the use of broken screws
Extraction instruments (guide for use in the operating room).**

1.

Bitte Gebrauchsanweisung vor dem Sterilisieren aus der Box entfernen.
Please remove the instruction before sterilisation.

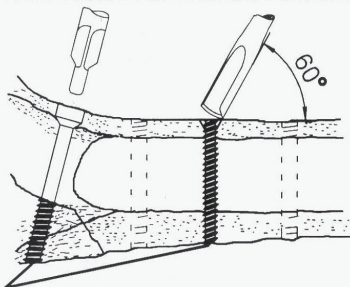

Abgebrochene Schrauben / Broken Screw / Vis Cassées / Viti Spezzate

Freilegung des Schraubenkanals und der abgebrochenen Schraube als Zentrierung für den Hohlfräser, mit Kopfraumfräser oder Spezialmeißel.


Exposure of the screw hole and the broken screw, which serves to centre the hollow reamer, using a countersink or special osteotome.

Préparation de l'orifice et de la vis cassée pour centrer le trépan au moyen de la fraise à chambre ou du ciseau gouge spécial.

Messa a nudo del canale della vite e della vite spezzata tramite la fresa per sede conica oppure opposto scalpello.

2.

Zentrierbolzen
Centering tip
Guide de centrage
Perno di centraggio

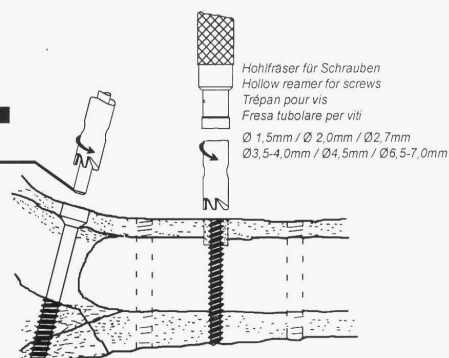

Hohlfräser für Schrauben
Hollow reamer for screws
Trépan pour vis
Fresa tubolare per viti
Ø 1,5mm / Ø 2,0mm / Ø 2,7mm
Ø 3,5-4,0mm / Ø 4,5mm / Ø 6,5-7,0mm

Mit Hohlfräser Zugang für den Extraktionsbolzen ausfräsen, Schraubenrichtungen beachten. Bei Hohlfräser Zentrierbolzen entfernen wenn der Schraubenstumpf erreicht ist.


The orientation of the screw is noted. The hole for the extraction bolt is cut using the hollow reamer. The centering tip is removed as soon as it contacts the screw fragment.

Préparer l'approche pour le boulon d'extraction à l'aide du trépan en observant la direction de la direction de la vis. Enlever le guide de centrage au moment où il entre en contact la vis cassée.

Aprire la via per il perno d'estrazione con la fresa tubolare osservando la direzione della vite. Estrarre il perno di centraggio dalla fresa tubolare appena si raggiunge il resto della vite.

3.

Extraktionsbolzen für Schrauben
Extracting bolt for screw
Boulon d'extraction pour vis
Perno d'estrazione per viti
Ø 1,5mm / Ø 2,0mm / Ø 2,7mm
Ø 3,5-4,0mm / Ø 4,5mm / Ø 6,5-7,0mm

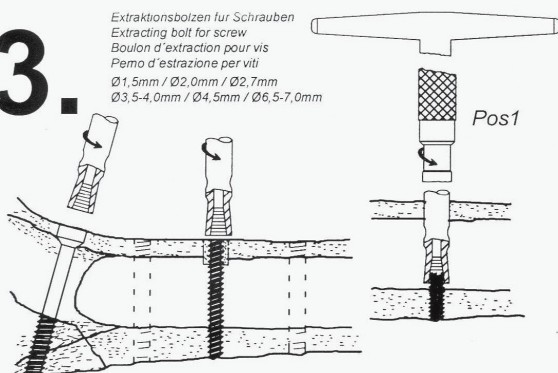

Mit Linksdrehung den Extraktionsbolzen kräftig auf den Schraubenstumpf drücken und herausdrehen.


The extraction bolt is strongly pressed onto the screw fragment and rotated anticlockwise, thus allowing the fragment to be screwed out.

Extraction de la vis en enfonçant avec force le boulon sur la vis cassée puis en le tournant de droite à gauche.

Premere forte il perno d'estrazione sulla vite spezzata ed estrarla ed estrarla girando a sinistra.

Konische Extraktions Schraube für
Conical extraction screw
Vis d'extraction conique
Vite d'estrazione conica

für / for / pour / per Ø 1,5/2,0mm
für / for / pour / per Ø 2,7/3,5/4,0mm
für / for / pour / per Ø 4,5/6,5/7,0mm#

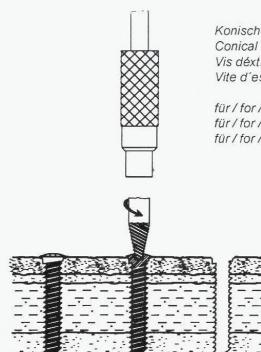

Bei beschädigtem Innensechskant passende konische Extraktionsschraube mit Griffstück Pos1 unter Druck und Linksdrehung möglichst senkrecht eindrehen und Schraube entfernen.

If the hexagonal socket is damaged, insert the fitting conical extraction screw with handle Pos1 as vertically as possible under pressure and left-hand rotation and remove the screw.

En cas d'une empreinte hexagonale intérieure endommagée, visser la vis d'extraction juste avec poignée Pos1 sous pression et rotation inversée aussi verticalement que possible et enlever la vis. In caso che l'esagone incassato è danneggiato, avvitare la vite conica per estrazione adatta con l'impugnatura Pos1 sotto pressione e torsione sinistrorsa il più verticalmente possibile e rimuovere la vite.




Conical Extraction Screws Konische Extraktionsschrauben



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-1516-003	Conical Extraction Screw for 1.5 / 2.0 mm Screws Konische Extraktionsschraube für 1,5 / 2,0-mm-Schrauben
52-2716-003	Konische Extraktionsschraube für 2,7 / 3,5 / 4,0-mm-Schrauben Conical Extraction Screw for 2.7 / 3.5 / 4.0 mm Screws
52-4516-003	Konische Extraktionsschraube für 4,5 / 5,0 / 6,5 / 7,0-mm-Schrauben Conical Extraction Screw for 4.5 / 5.0 / 6.5 / 7.0 mm Screws

Hohlfräser komplett Hollow Reamers complete

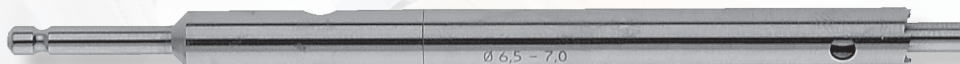

Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-1516-002	Conical Extraction Screw for 1.5 / 2.0 mm Screws Konische Extraktionsschraube für 1,5 / 2,0-mm-Schrauben
52-2016-002	Konische Extraktionsschraube für 2,7 / 3,5 / 4,0-mm-Schrauben Conical Extraction Screw for 2.7 / 3.5 / 4.0 mm Screws
52-2716-002	Konische Extraktionsschraube für 4,5 / 5,0 / 6,5 / 7,0-mm-Schrauben Conical Extraction Screw for 4.5 / 5.0 / 6.5 / 7.0 mm Screws
52-3516-002	Hohlfräser für 3,5 / 4,0 mm Schrauben Hollow Reamer for 3.5 / 4.0 mm Screws
52-4516-002	Hohlfräser für 4,5-mm-Schrauben Hollow Reamer for 4.5 mm Screws
52-6516-002	Hohlfräser für 5,0 / 6,5 / 7,0 mm Schrauben Hollow Reamer for 5.0 / 6.5 / 7.0 mm Screws

Extraktionsbolzen Extraction Bolts



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-1516-001	Extraktionsbolzen für 1,5-mm-Schrauben Extraction Bolt for 1.5 mm Screws
52-2016-001	Extraktionsbolzen für 2,0-mm-Schrauben Extraction Bolt for 2.0 mm Screws
52-2716-001	Extraktionsbolzen für 2,7-mm-Schrauben Extraction Bolt for 2.7 mm Screws

Extraktionsbolzen Extraction Bolts



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-3516-001	Extraktionsbolzen für 3,5 / 4,0-mm-Schrauben Extraction Bolt for 3.5 / 4.0 mm Screws
52-4516-001	Extraktionsbolzen für 4,5-mm-Schrauben Extraction Bolt for 4.5 mm Screws
52-6516-001	Extraktionsbolzen für 5,0 / 6,5 / 7,0-mm-Schrauben Extraction Bolt for 5.0 / 6.5 / 7.0 mm Screws

Hohlfräser Rohr
Hollow Reamers Tube



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-1516-0203	Speer-Reibahle (Reibahlenrohr) für Hollow-Reibahle 1,5 mm (für 1,5 mm Schrauben) Spear Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 1.5 mm (used for 1.5 mm Screws)
52-2016-0203	Speer-Reibahle (Reibrohr) für Hollow-Reibahle 2,0 mm (für 2,0 mm Schrauben) Spear Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 2.0 mm (used for 2.0 mm Screws)
52-2716-0203	Speer-Reibahle (Reibrohr) für Hollow-Reibahle 2,7 mm (für 2,7 mm Schrauben) Spear Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 2.7 mm (used for 2.7 mm Screws)
52-3516-0203	Speer-Reibahle (Reibrohr) für Hollow-Reibahle 3,5 / 4,0 mm (für 3,5 / 4,0 mm Schrauben) Spear Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 3.5 / 4.0 mm (used for 3.5 / 4.0 mm Screws)
52-4516-0203	Speer-Reibahle (Reibahlenrohr) für Hollow-Reibahle 4,5 mm (für 4,5 mm Schrauben) Spear Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 4.5 mm (used for 4.5 mm Screws)
52-6516-0203	Speer-Reibahle (Reibrohr) für Hollow-Reibahle 5,0 / 6,5 / 7,0 mm (für 5,0 / 6,5 / 7,0 mm Schrauben) Spear Reamer (Reamer Tube) for Hollow Reamer 5.0 / 6.5 / 7.0 mm (used for 5.0 / 6.5 / 7.0 mm Screws)

Hohlfräser Rohr
Hollow Reamers Tube



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-1516-0202	Zentrischer Bolzen mit Hohlfräser für 1,5 mm Central Bolt used with Hollow Reamer for 1.5 mm
52-2016-0202	Zentrischer Bolzen mit Hohlfräser für 2,0 mm Central Bolt used with Hollow Reamer for 2.0 mm
52-2716-0202	Zentrischer Bolzen mit Hohlfräser für 2,7 mm Central Bolt used with Hollow Reamer for 2.7 mm
52-3516-0202	Zentrischer Bolzen mit Hohlfräser für 3,5 / 4,0 mm Central Bolt used with Hollow Reamer for 3.5 / 4.0 mm
52-4516-0202	Zentrischer Bolzen mit Hohlfräser für 4,5 mm Central Bolt used with Hollow Reamer for 4.5 mm
52-6516-0202	Zentrischer Bolzen mit Hohlfräser für 5,0 / 6,5 / 7,0 mm Central Bolt used with Hollow Reamer for 5.0 / 6.5 / 7.0 mm


scharfer Haken
Sharp Hook



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-4616-1800	Länge 155 mm / Length 155 mm



T-Griff groß mit AO-Schnellkupplung
T-Handle Large with AO-Quickcoupling

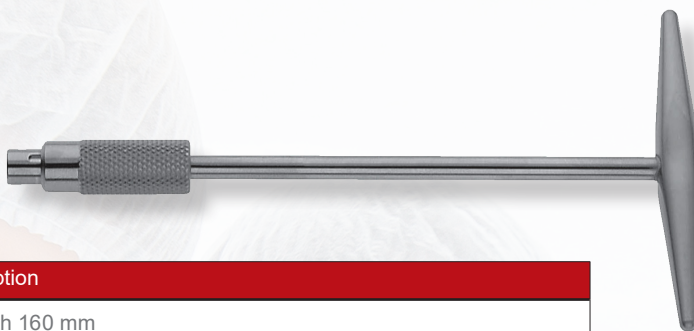

Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-0616-1600	Länge 160 mm / Length 160 mm

Schraubenhaltepinzette
Screw Holding Forceps



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-0121-1603	Länge 20,5 cm / 8" / Length 20,5 cm / 8"

Mini Lexer Hohlmeißel
Mini Lexer Gouge



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-0300-1600	Länge 4.0 mm / Length 4.0 mm

Mini Lexer Hohlmeißel
Mini Lexer Gouge




Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-0300-1601	Länge 6.0 mm / Length 6.0 mm

Mini Lexer Hohlmeißel
Mini Lexer Gouge



Art.Nr. / Ref.No.	Beschreibung / Description
52-0300-1603	Länge 10 mm / Length 10 mm



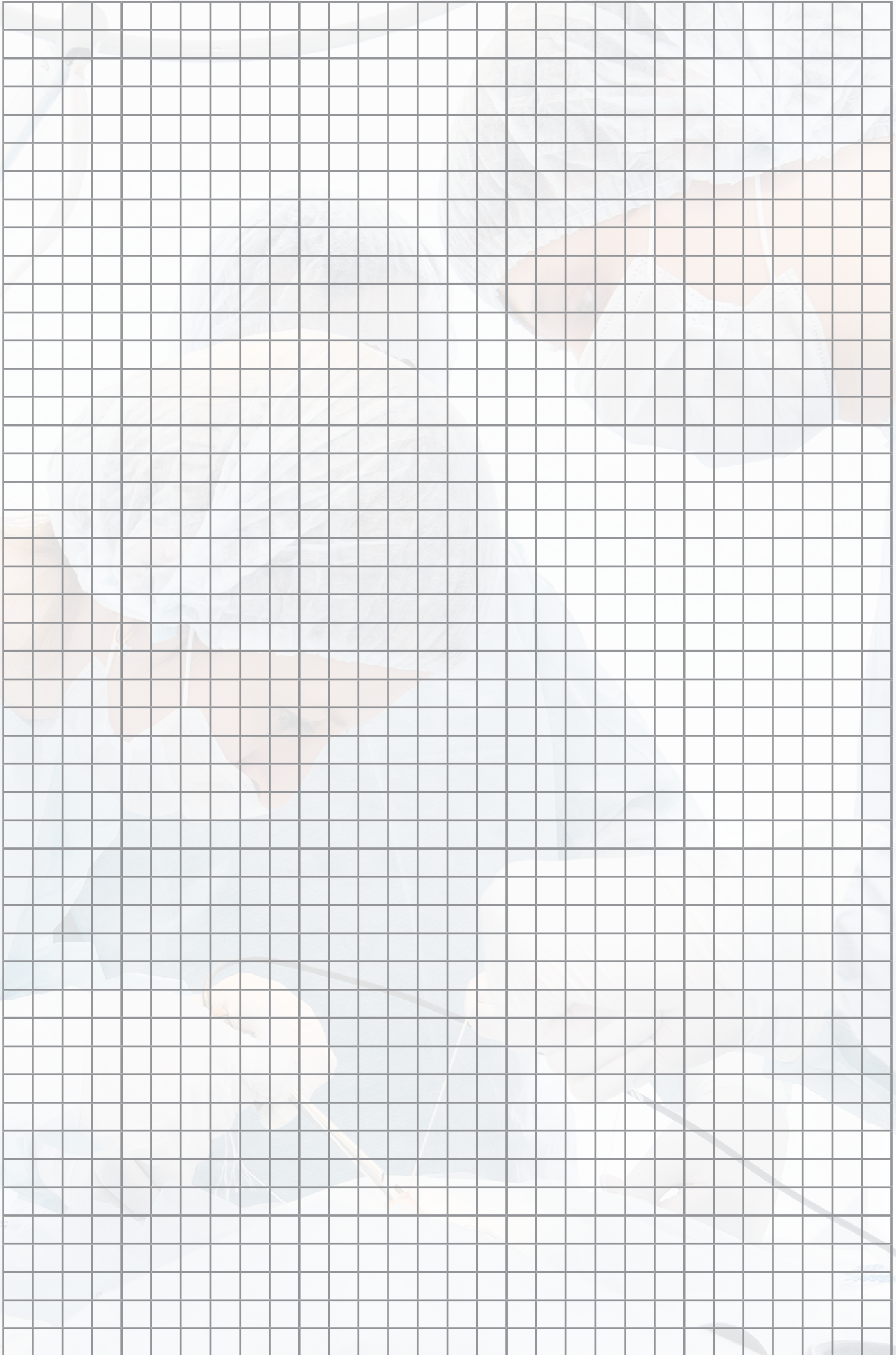

Schauen Sie auch in unseren weiteren
Schraubenentfernungs-Sets Katalogen
für eine schnelle und unkomplizierte
Entfernung von Schrauben und
Implantaten.

ESR Schraubenentfernung Set
SD ESR Schraubenentfernung Set
S ESR Schraubenentfernung Set
U ESR Schraubenentfernung Set

See also our other Screw Removal Set
catalogs for quick and easy removal
of screws and implants.

ESR Screw removal Set
SD ESR Screw removal Set
S ESR Screw removal Set
U ESR Screw removal Set



digimed
Medizintechnik

Digimed Medizintechnik
Inhaber: Patrick Mohr

Kreutzerstrasse 1
78573 Wurmlingen
Telefon: +49-(0)7461-9101172
Fax: +49-(0)7461-9101172

info@digi-med-de / www.digi-med-de